

Obsah skryt

1 Elektrický invalidní vozík

2 Návod k použití produktu

3 FAQ

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

5 POPIS PRODUKTU

6 SHROMÁŽDĚNÍ

7 CONTROLLER

8 DÁLKOVÝ OVLADAČ

9 BATERIE

10 ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

11 SPECIFIKACE

12 Dokumenty / zdroje

12.1 Reference



Návod k použití produktu

Povolte šrouby, nastavte opěradlo do pohodlné polohy a poté šrouby znovu utáhněte.

Ujistěte se, že je opěrka hlavy řádně utažena a zajištěna ve své poloze.

Opěrku hlavy lze polohovat nahoru a dolů.

Připojte joystick k pravé nebo levé loketní opěrce.

Pro nastavení sklonu opěradla stiskněte nastavovací tlačítko, dokud nezačne blikat prostřední LED.

Stisknutím tlačítka potvrďte nastavení úhlu a pomocí joysticku změňte úhel dopředu nebo dozadu.

Před jízdou se seznámte s ovládáním.

Nacvičte si jízdu za asistence druhé osoby na bezpečném místě bez provozu.

Před nástupem se vždy ujistěte, že je vozík vypnutý.

Nastavte maximální rychlost podle svých schopností.

Zpočátku procvičujte ovládání při nejnižší rychlosti.

Vždy pohybujte joystickem v požadovaném směru jízdy.

Ezoic

Cvičte pohyb vpřed, S obraty a pohyby vzad.

Použijte joystick k ovládání rychlosti a směru.

Stisknutím tlačítka napájení zapněte nebo vypněte invalidní vozík.

Stav baterie se zobrazuje na ovládacím panelu.

FAQ

Q: Jak nastavím úhel opěradla?

A: Stiskněte tlačítko nastavení, dokud nezačne blikat prostřední LED, pomocí joysticku změňte úhel, poté stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Q: Co mám dělat, když se invalidní vozík neočekávaně zastaví?

A: Pokud se vozík neočekávaně zastaví, okamžitě jej vypněte a odpojte baterii. Další pokyny naleznete v příručce pro odstraňování problémů.

si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši web místo www.elektrickekolobezky.eu kde najdete nejnovější verzi návodu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Pokud se objeví nějaké ostré hrany, zařízení nepoužívejte.

V případě poruchy okamžitě přestaňte používat a kontaktujte servis. Neopravujte invalidní vozík sami.

Před použitím se naučte používat invalidní vozík, najděte bezpečný a otevřený prostor a vyhledejte pomoc u jiné osoby, dokud nebudete moci vozík bezpečně používat.

Před zapnutím a vypnutím se ujistěte, že je produkt vypnutý.

Jezděte vždy takovou rychlostí, abyste neohrozili sebe ani ostatní a jejich majetek.

Vždy doporučujeme startovat na nejnižší rychlostní stupeň.

Některá komunikační zařízení mohou pracovat na stejné frekvenci jako dálkový ovladač invalidního vozíku. Máte-li u sebe nějaké takové zařízení (telefon apod.), zkontrolujte, zda nebude překážet ovladači.

Některé vysílače mohou rušit dálkové ovládání invalidního vozíku.

Pokud zaznamenate jakýkoli nežádoucí pohyb nebo se vozík náhle zastaví, okamžitě jej vypněte.

Výrobek neopravujte ani neupravujte.

Pokud nastane některá z popsaných situací, okamžitě vypněte invalidní vozík: náhlý pohyb bez zásahu uživatele, nelze ovládat směr jízdy a selhání brzd.

Invalidní vozík je určen pro přepravu jedné osoby.

Nejezděte do příliš strmých kopců.

Neřidte pod vlivem drog, léků nebo alkoholu.

Za vozíkem netahejte jiná vozidla ani předměty.

Netahejte invalidní vozík za jinými vozidly.

Nepřekračujte maximální povolený jízdní úhel.

Nehýbejte náhle joystickem, když se invalidní vozík pohybuje.

Vozík je určen pouze pro jednu osobu a nepřekračujte maximální nosnost vozíku.

Nevypínejte invalidní vozík, když se pohybuje, mohlo by dojít k poškození motoru nebo ovládacích prvků. Vozík vypněte pouze tehdy, když ztratíte kontrolu.

Nejezděte po nepevněném povrchu (písek, hluboká tráva, jemná hlína atd.)

Nejezděte po schodech.

Před čištěním a údržbou se ujistěte, že je invalidní vozík vypnutý.

Nezapínejte invalidní vozík, pokud na něm nesedíte.

Vozík není určen pro provoz na veřejných komunikacích. Jezděte pouze po komunikacích k tomu určených (chodník).

Neměňte náhle směr (vpřed – vzad). Změňte směr jízdy, když se invalidní vozík zastaví.

Vždy jeďte z kopce nejnižší rychlostí, joystick ponechte blízko střední polohy.

Vždy mějte nohy na opěrce nohou.

Před jízdou se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

Vozík nabíjejte v dobře větrané místnosti.

Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly dotaženy a správně fungují.

Ezoic

Před couváním se ujistěte, že za vámi není žádná překážka. Vraťte se na nejnižší rychlost.

Vyvarujte se náhlých pohybů a náhlých změn směru.

Udržujte ruce a nohy na područkách.

Ezoic

Nejezděte přes překážky vyšší než 5 cm.

Nejezděte přes mezery delší než 10 cm.

Maximální sklon je 12°.

Ezoic

Pokud jedete do kopce, necouvejte.

Nejezděte po povrchu, který je nakloněn o více než 3° do strany.

Nejezděte po měkkém, nerovném nebo nezajištěném povrchu (tráva, štěrk).

Před jízdou z kopce nastavte nejnižší rychlost, jízda z kopce prodlužuje brzdnou dráhu.

Nejezděte přes nerovnosti, jako jsou patníky atd.

Nejezděte ve vodě, na ledu nebo sněhu nebo za zhoršené viditelnosti.

Ezoic

Nenechávejte vozík vystavený přímému slunečnímu záření nebo povětrnostním vlivům.

Chraňte před deštěm a vodou.

Ovládací panel není vodotěsný.

Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené pneumatiky okamžitě vyměňte.

Nejezděte v dešti nebo na mokré vozovce. Hrozí poškození elektroniky a baterie.

Dálkový ovladač je napájen 2x AAA bateriemi.

Ezoic

Celková nosnost: 110 kg

Dálkové ovládání až 15 m (v závislosti na okolních podmínkách)

Maximální rychlost až 6 km/h za optimálních podmínek

Maximální dojezd až 24 km za optimálních podmínek

Vozík je poháněn motory 2x 350W

POPIS PRODUKTU



- 1 Joystick
- 2 Napájecí port joysticku
- 3 Bezpečnostní pás
- 4 Opěrka nohou
- 5 8" přední kola
- 6 Tlačítko pro sklopení područěk
- 7 12" zadní kola



1 Přepínání pohonu elektrický / manuální

2 Spona na složení

3 Adaptér baterie

4 Nastavitelný zámek kola

SHROMÁŽDĚNÍ

Opěrka hlavy



Povolte šrouby, nastavte opěradlo do pohodlné polohy a poté šrouby znovu utáhněte.

Ujistěte se, že je opěrka hlavy řádně utažena.



Zajistěte opěrku hlavy v poloze.



Opěrku hlavy lze polohovat nahoru a dolů.



Nástavec na joystick

Připojte joystick k pravé nebo levé loketní opěrci.

Pokud chcete nastavit úhel opěradla, stiskněte nastavovací tlačítko, dokud nezačne blikat prostřední LED.



Chraňte joystick a ovládací panel před nárazy a pády.

Chraňte ovládací panel a joystick před nadměrnou vlhkostí a nečistotami.



backward




confirm button

forward

Ovládací panel a joystick očistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné agresivní čisticí prostředky.

POUŽITÍ

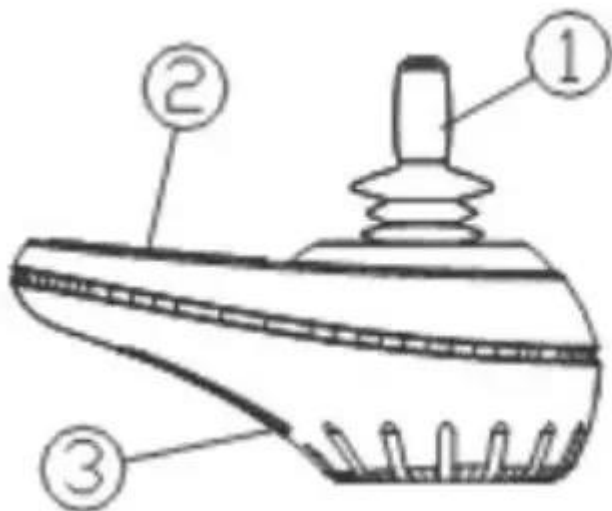


1. Joystick

2. Control panel

3. Power port

Před jízdou se seznámte s ovládáním. Nejprve si vyzkoušejte jízdu za asistence druhé osoby na bezpečném místě bez provozu.

Před nástupem se vždy ujistěte, že je vozík vypnutý. Nastavte maximální rychlost podle svých schopností. Doporučujeme ponechat rychlost na nižších hodnotách, dokud se zcela neseznámíte s manipulací s vozíkem.

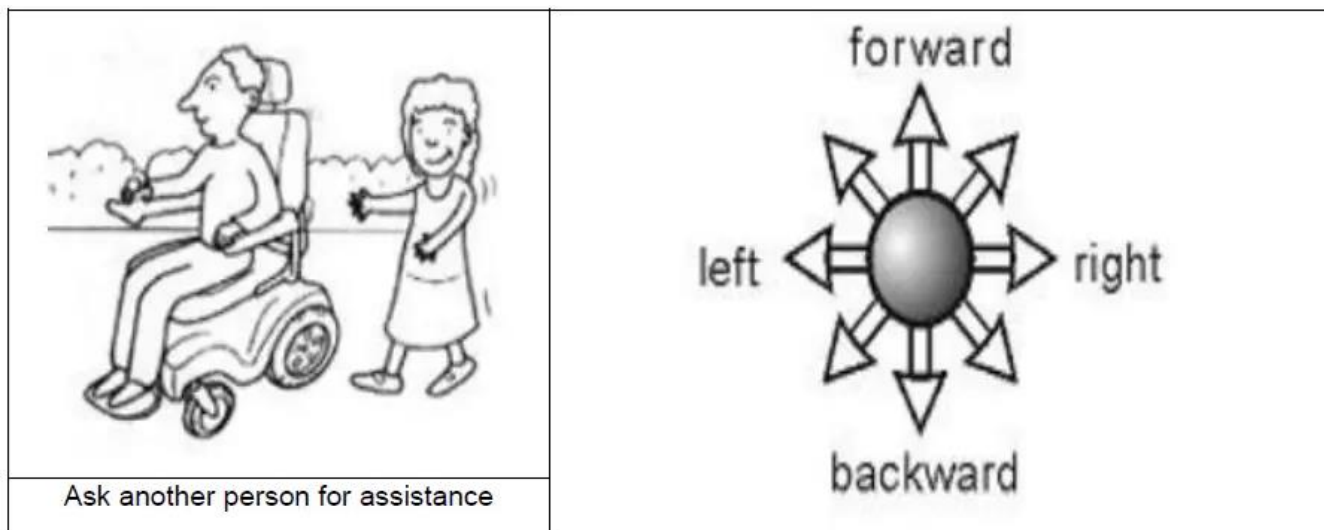


Vždy cvičte ovládání při nejnižší rychlosti. Vždy pohybujte joystickem v požadovaném směru jízdy. Zkuste se nejprve pohnout vpřed. Pak vyzkoušejte „S zatáčky“.

Pokud umíte jet vpřed a zatáčet, naučte se couvat. Při couvání dávejte pozor na svou rychlost a na to, zda vám v cestě nestojí další lidé nebo překážky.

Jakmile pustíte joystick, vozík se přestane pohybovat.

Pokud nastane jedna z následujících situací, okamžitě vypněte invalidní vozík a odpojte baterii:

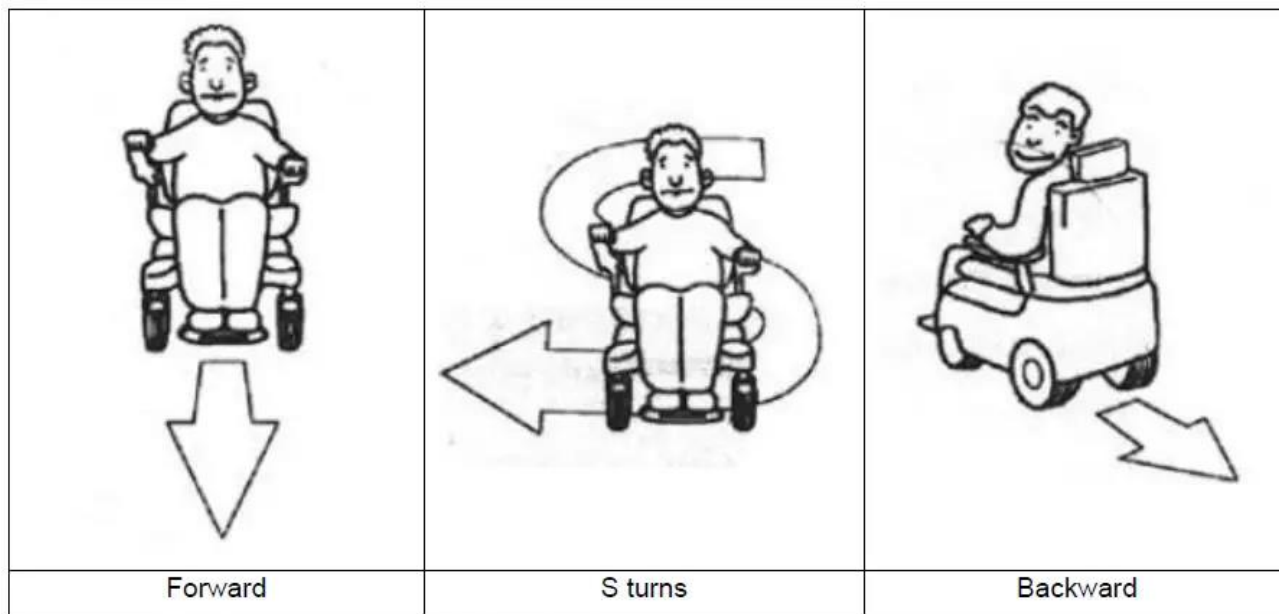

Náhly pohyb bez vstupu signálu

Směr jízdy není pod kontrolou

Porucha brzdy

Při jízdě dodržujte tyto pokyny:

Při couvání se ujistěte, že za vámi není žádná překážka. Vždy couvejte na nejnižší rychlostní stupeň.

Brzděte pomalu. Nedělejte nepravdivé a náhlé změny v pohybu.

Vždy mějte končetiny na područkách a stupačkách.

Nikdy nejezděte přes překážky, které jsou vyšší než 5 mm.

Nikdy nepřejíždějte mezery širší než 10 cm.

Nejezděte po terénu, který má sklon vyšší než 12°.

Nikdy necouvejte na svažitém terénu.

Nejezděte po nakloněné ploše, hrozí převrácení.

Nejezděte po nepevném terénu, jako je tráva, štěrk nebo polní cesty.

Při jízdě z kopce jeďte pomalu a kontrolujte rychlost.

Před opuštěním invalidního vozíku se ujistěte, že jste na rovném povrchu a že je vozík vypnutý.

CONTROLLER



- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Joystick | 6. Polohování zádové opěrky |
| 2. Tlačítko potvrzení | 7. Snížit max. Rychlost |
| 3. Zvýšit max. Rychlost | 8. Roh |
| 4. Ukazatel rychlosti | 9. Indikátor baterie |
| 5. Tlačítko napájení | |

Zapnout

Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí invalidního vozíku. V případě nouze můžete tlačítko použít jako nouzovou brzdu.

Aktuální stav baterie je zobrazen na ovládacím panelu.

Během zapínání se všechny indikátory rozsvítí a zobrazí se aktuální stav baterie.

Během vypínání všechny indikátory zhasnou.

Joystick

Pomocí joysticku můžete ovládat rychlost a směr jízdy. Čím dále je joystick od středu, tím rychleji se vozík pohybuje. Pokud joystick pustíte, vrátí se do původní středové polohy a vozík se zastaví.

Rychlost (S1 – S5)

Indikátory ukazují maximální rychlost. Indikátory jsou rozděleny do 5 segmentů, čím vyšší číslo, tím vyšší maximální rychlost.

Roh

Stisknutím zazní klakson.

Snížit max. Rychlost

Stisknutím tlačítka snížíte maximální možnou rychlost. Úpravy je nutné provádět vždy, když vozík není v pohybu.

Zvýšit max. Rychlost

Stisknutím tlačítka zvýšíte maximální možnou rychlost. Úpravy je nutné provádět vždy, když vozík není v pohybu.


TABULKA INDIKÁTORŮ A PORUCH

Změna pohonu – manuální/elektrický

Pomocí páček na obou motorech můžete přepnout pohon na ruční tlačný nebo pomocí dvou elektromotorů.

U hnacích motorů musí obě páky směřovat nahoru.

U manuálního ovládání musí být obě páky dole.

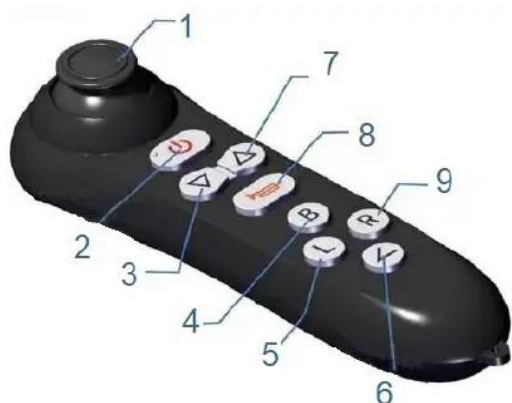

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkové ovládání je napájeno 2x AAA bateriemi.

1. Joystick

2. Tlačítko napájení
3. Snižte max. Rychlost
4. Opěrka zad
5. Žádná funkce pro tento model
6. Žádná funkce pro tento model
7. Zvyšte max. Rychlost
8. Houkačka
9. Žádná funkce pro tento model

Spárování dálkového ovladače

Zapněte ovladač na invalidním vozíku.



Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači na 5 sekund.



Stiskněte sníženou max. tlačítko rychlosti na ovladači invalidního vozíku, dokud se nerozsvítí prostřední LED.

Stiskněte tlačítko klaksonu na ovladači invalidního vozíku.



Stiskněte tlačítko snížení max. rychlost na dálkovém ovladači, dokud tlačítko napájení nepřestane blikat.



LED na ovladači invalidního vozíku zhasne a ovladače jsou spárovány.



Chcete-li změnit úhel opěradla, stiskněte tlačítko B a poté pomocí šipek nastavte úhel.



Pomocí joysticku pak můžete vozík ovládat.



SKLÁDACÍ



Stiskněte přezku za opěradlem.



Uchopte opěradlo a zatlačte dopředu.



Vyjmutí baterie



Odpojte napájecí kabel



Uchopte baterii a vytáhněte ji z rámu.

BATERIE

Invalidní vozík používá lithiovou baterii 24 V 12 Ah. Baterii vyměňujte pouze v autorizovaném servisním středisku.

Záruka na baterii 6 měsíců – garantujeme, že jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % její celkové kapacity do 6 měsíců od prodeje produktu.

Pro správnou funkci a bezpečné používání baterie postupujte podle pokynů v příručce. Pokud je baterie poškozená, vytéká z ní kapalina nebo cítíte neobvyklý zápach, okamžitě ji přestaňte používat.

Životnost baterie je omezená. Pokud používáte baterii, která překračuje běžnou životnost, může se zvýšit frekvence nabíjení a dojezd invalidního vozíku se sníží.

Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Nevkládejte do baterie cizí předměty.

Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo se poškodit.

Používejte pouze originální nabíječku.

Při řízení dodržujte místní předpisy a zákony.

Baterii můžete nabíjet nepřetržitě.

Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.

Pokud baterii používáte delší dobu, její teplota bude vyšší. Toto je normální stav baterie.

Pokud baterii používáte v chladném prostředí, dojezd je nižší.

Sami baterii neopravujte ani neupravujte.

BATERIE SE NABÍJÍ

Baterie se nabíjí AC 110 – 240V 50 – 60 Hz, výstup 24V, nabíječka 2Ah.

Před prvním použitím baterii nabijte. Poté vybijte baterii jejím používáním, nejezděte rychle a nevzdalujte se příliš daleko od svého bydliště, dokud se nenaučíte ovládat vozík. Poté baterii nabíjejte po dobu 8-14 hodin. Po 4 – 5 nabíjecích cyklech je kapacita baterie využita na 100 %.

INFORMACE O BATERIÍCH

Po použití baterii co nejčastěji dobíjejte. Baterie se postupně vybíjí, i když se nepoužívá. Pokud vozík nepoužíváte pravidelně, dobijte baterii jednou týdně. Používejte pouze originální nabíječku.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Používejte jemné čisticí prostředky a adamp hadřík na čištění. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Vždy řádně vysušte všechny části, zejména elektronické části.

Udržujte ovladač a panel mimo dosah vody.

Zkontrolujte stav kabelů a spojů.

K čištění nepoužívejte vysokotlaké čističe.

Vozík skladujte na dobře větraném místě bez korozivních plynů a vlhkosti vzduchu nižší než 80 %.

Ezoic

SPECIFIKACE

Model W5521 s polohováním

Rozměr (složený) 1100x630x1180 mm

Hmotnost s baterií 36 kg

Přední kola Rozměr 200×50 mm

Zadní kola Rozměr 320×60 mm

Nosnost 130 kg

Rychlost vpřed 0 – 6 km/h

Dojezd na jedno nabití Cca. 24 km

Motor 2x 24V/350W

Poloměr otáčení 600 mm

Baterie (Lithium) 24V/12Ah

Brzdy Elektromagnetické

Kola proti převrácení Rozměr 50×25 mm

Náklon Max. 25 °

Nabíječka AC100-240V 50/60Hz

Výstup: 24V 2A

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti výrobku nebo pokud je případná oprava neekonomická, zlikvidujte jej v souladu s místními zákony a ekologicky v nejbližším vrakovišti.

Správnou likvidací budete chránit životní prostředí a přírodní zdroje. Navíc můžete přispět k ochraně lidského zdraví. Pokud si nejste jisti správnou likvidací, požádejte místní úřady, aby se vyhnuly porušování zákona nebo sankcím.

Baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte je na sběrné místo.

Prodávajícím je SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem ul. Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 116888.

Podle platných právních předpisů záleží na tom, zda je Kupující Koncovým zákazníkem či nikoliv.

„Kupující koncový zákazník“ nebo jen „koncový zákazník“ je právnická osoba, která neuzavírá a neplní smlouvu za účelem provozování nebo podpory vlastní obchodní nebo podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není Koncovým zákazníkem“ je Podnikatel, který nakupuje Zboží nebo užívá služby k tomu, aby zboží nebo služby využíval pro svou podnikatelskou činnost. Kupující se řídí Všeobecnou kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Tyto záruční podmínky a reklamace jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Všechny záruční podmínky jsou platné a závazné, pokud není v kupní smlouvě, v dodatku k této smlouvě nebo v jiné písemné dohodě uvedeno jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud není v Záručním listu, faktuře, dodacím listu nebo jiných dokumentech souvisejících se zbožím uvedeno jinak. Zákonná záruční doba poskytovaná Spotřebiteli tím není dotčena.

Zárukou za jakost zboží prodávající zaručuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé k běžnému nebo smluvnímu použití a že si zachová obvyklé nebo smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka na baterii 6 měsíců – garantujeme, že jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % její celkové kapacity do 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruka se nevztahuje na vady vyplývající (pokud jsou použitelné): Všeobecné záruční podmínky a definice pojmů

Všechny záruční podmínky zde uvedené v části určují rozsah záruky a postup reklamace záruky. Záruční podmínky a reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to i v případech, které tento záruční řád neupravuje.

Chyba uživatele, tj. poškození výrobku způsobené nekvalifikovanou opravou, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlovky do rámu, nedostatečným dotažením pedálů a klik

Nesprávná údržba

Mechanická poškození

Pravidelné používání (např. opotřebení pryžových a plastových dílů, pohyblivých mechanismů, kloubů, opotřebení brzdových destiček/bloků, řetězu, pneumatik, kazety/více kole atd.)

Neodvratitelná událost, přírodní katastrofa

Úpravy provedené nekvalifikovanou osobou

Nesprávná údržba, nevhodné umístění, škody způsobené nízkou nebo vysokou teplotou, vodou, nevhodným tlakem, otřesy, záměrnými změnami v designu nebo konstrukci atd.

Postup při reklamaci záruky

Kupující je povinen zkontrolovat Zboží dodané Prodávajícím bezprostředně po převzetí odpovědnosti za Zboží a jeho škody, tj. ihned po jeho dodání. Kupující je povinen zkontrolovat Zboží tak, aby zjistil všechny vady, které lze takovou kontrolou zjistit.

Při uplatňování reklamace je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a platnost reklamace fakturou nebo dodacím listem, který obsahuje sériové číslo výrobku, případně dokumenty bez sériového čísla.

Pokud kupující neprokáže oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Oznámí-li kupující vadu, na kterou se záruka nevztahuje (např. v případě, že nebyly splněny Záruční podmínky nebo v případě nahlášení vady omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat náhradu všech nákladů spojené s opravou. Cena bude kalkulována dle platného ceníku služeb a nákladů na dopravu.

Pokud prodejce zjistí (testováním), že produkt není poškozen, reklamace není uznána. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu nákladů vyplývajících z nepravdivé reklamace.

V případě, že kupující reklamuje zboží, na které se ze zákona vztahuje záruka poskytovaná prodávajícím, prodávající nahlášené vady opraví opravou nebo výměnou poškozeného dílu nebo výrobku za nový. Na základě dohody Kupujícího je

Prodávající má právo na výměnu vadného Zboží za plně kompatibilní Zboží stejných nebo lepších technických vlastností. Prodávající je oprávněn zvolit formu reklamačního řádu popsanou v tomto odstavci.

Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů po dodání vadného zboží, pokud nebude dohodnuta delší lhůta. Za den předání opraveného nebo vyměněného Zboží Kupujícímu se považuje den

Vyřízení reklamace ze záruky. V případě, že prodávající není schopen vyřídit reklamaci ve sjednané lhůtě s ohledem na specifickou povahu vady zboží, dohodne se s kupujícím na náhradním řešení. V případě, že k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční kompenzaci ve formě vrácení peněz.

CZ