


TECHNICKÝ MANUÁL

Elektrický zvedák pro seniory z podlahy

Elektrické zvedací zařízení určené ke zvedání osoby z podlahy nebo velmi nízké polohy.

Elektrický zvedák pro seniory

z podlahy – bezpečný a snadný způsob, jak se postavit

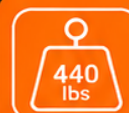

Nosnost
440 LBS
(cca 199,6 kg)



Dálkové ovládání



Nosnost
440 LBS
(cca 199,6 kg)



Rozsah zdvihu
77–507 mm
(3,03–19,96 palce)



Vestavěná baterie
14,8 V / 2,2 Ah
Lithiová



Doba nabíjení
2,5 hodiny
Více než 10 použití
na jedno nabití



Stabilní konstrukce
z vysoce kvalitních
materiálů

Popis částí



- 1 Rám zvedáku
- 2 Opěradlo
- 3 Boční madla
- 4 Bezpečnostní pás
- 5 Sedák
- 6 Elektrický pohon
- 7 Baterie
- 8 Základna
- 9 Protiskluzové nožky
- 10 Dálkové ovládání
- 11 Nabíječka

Technické parametry

Nosnost	440 LBS (cca 199,6 kg)
Rozsah zdvihu	77–507 mm (3,03–19,96 palce)
Výška sedu dole	2,6" (6,6 cm)
Výška sedu nahoře	22,2" (56,4 cm)
Šířka sedáku	15,9" (40,4 cm)
Hloubka sedáku	15,8" (40,1 cm)
Celková šířka základny	19,8" (50,3 cm)
Celková hloubka	23,7" (60,2 cm)
Baterie	14,8 V / 2,2 Ah lithiová
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Počet použití	více než 10 na jedno nabití
Materiál	ocel, hliník, PU kůže, plast
Hmotnost	cca 18–20 kg (dle varianty)

Rozměry



Použití – zvedání z podlahy

- 1 Umístěte zvedák na rovný povrch k osobě, která potřebuje pomoc.
- 2 Spusťte sedák do nejnižší polohy (2,6 cm).
- 3 Usadte osobu na sedák a zajistěte bezpečnostní pás.
- 4 Pomocí dálkového ovládání zvedněte sedák do požadované výšky.
- 5 Osoba se může bezpečně postavit nebo se přesunout na vozík, postel apod.

Nabíjení



- Použijte dodanou nabíječku.
- Doba nabíjení: 2,5 hodiny.
- Po plném nabití je možné více než 10 použití.
- Baterie je integrována v zařízení.

Bezpečnostní pokyny

- NEPOUŽÍVAT VE VANĚ ANI NEPONOROVAT DO VODY.**
- Používejte pouze na suchém a rovném povrchu.
 - Před použitím zkontrolujte stav zařízení.
 - Nepřekračujte maximální nosnost 440 LBS (199,6 kg).
 - Používejte bezpečnostní pás.
 - Udržujte mimo dosah dětí.

Údržba a kontrola

- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a spoje.
- Udržujte sedák a rám v čistotě (vlhký hadřík, bez agresivních čistících prostředků).
- Kontrolujte stav baterie a nabíječky.
- Při poškození zařízení nepoužívejte a kontaktujte servis.

Obrázek výrobku s technickými údaji, rozměry a popisem ovládání.

1. URČENÍ VÝROBKU

Tento elektrický zvedák je určen především k bezpečnému zvednutí osoby ze země, podlahy nebo jiné nízké polohy do výšky vhodné pro následný přesun. Je určen pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí, pokud jejich zdravotní stav umožňuje použití tohoto typu zařízení.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO PRO POUŽITÍ VE VANĚ ANI PRO PONOŘOVÁNÍ DO VODY.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Specifikace
Nosnost uvedená na fotografii	440 lb / cca 199,6 kg
Baterie	14,8 V / 2,2 Ah Li-ion
Doba nabíjení	cca 2,5 hodiny
Použití na jedno nabití	více než 10 cyklů*
Rozsah zdvihu	77–507 mm
Konstrukce	zvedací mechanismus ve tvaru X
Tlačné tyče	nerezová ocel SUS304
Ovládání	dálkové ovládání
Nabíječka	CE certifikovaná nabíječka
Rozměry z fotografie	19,8 × 23,7 × 22,2 palce

* Výdrž závisí na zatížení, stavu baterie a provozních podmínkách.

3. POPIS ČÁSTÍ

Podle vloženého technického obrázku: rám zvedáku, opěradlo, boční madla/opěrky, bezpečnostní pás, sedák, elektrický pohon, baterie, základna, protiskluzové nožky, dálkové ovládání a nabíječka.

4. NABÍJENÍ

Před použitím zkontrolujte stav baterie. Baterie má podle dodaných údajů 14,8 V / 2,2 Ah. Plné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny. Používejte pouze dodanou nebo výrobcem schválenou nabíječku. Elektrické konektory a nabíječku chraňte před vodou.

5. OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání slouží ke zvedání a spouštění sedáku. Před spuštěním pohybu musí být osoba stabilně usazena a prostor mechanismu volný. Pohyb provádějte pomalu a kontrolovaně. Rozsah zdvihu je 77–507 mm.

6. POSTUP ZVEDNUTÍ OSOBY Z PODLAHY

1. Umístěte zvedák na pevný a rovný povrch.
2. Zkontrolujte stav konstrukce a nabití baterie.
3. Pomozte osobě bezpečně se usadit na sedák.
4. Zkontrolujte správnou polohu a stabilitu osoby.
5. Ujistěte se, že v prostoru mechanismu nejsou ruce, nohy ani oděv.
6. Pomocí dálkového ovladače pomalu zvedejte sedák.
7. Po dosažení potřebné výšky pohyb zastavte.
8. Proveďte bezpečný přesun osoby.

7. BEZPEČNOST

- **Nepřekračujte maximální nosnost.**
- **Nenechávejte osobu při zvedání bez dozoru.**
- **Nevkládejte prsty do zvedacího mechanismu.**

- **Nepoužívejte zařízení na schodech nebo nestabilním povrchu.**
- **Nepoužívejte poškozené zařízení.**
- **Nepoužívejte ve vaně ani neponořujte do vody.**

8. ÚDRŽBA A KONTROLA

Pravidelně kontrolujte sedák, rám, zvedací mechanismus, baterii, dálkové ovládání, šrouby a spojovací prvky. Čistěte měkkým hadříkem a vhodným prostředkem. Při prasklině, deformaci nebo jiné závadě zařízení vyřadte z provozu.

9. KONTROLA PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- ☐ baterie je dostatečně nabitá
- ☐ sedák je správně upevněn
- ☐ dálkové ovládání funguje
- ☐ zvedání a spouštění je plynulé
- ☐ mechanismus není zablokovaný
- ☐ rám není poškozen
- ☐ uživatel nepřekračuje povolenou nosnost
- ☐ podlaha je pevná a rovná

10. TECHNICKÁ IDENTIFIKACE

Model	_____
Výrobce	_____
Výrobní číslo	_____
Maximální nosnost	_____ kg
Rozsah zdvihu	_____ mm
Datum kontroly	_____

Důležité: údaje 440 lb, rozměry a další hodnoty v tomto manuálu odpovídají informacím z dodaného obrázku a produktových podkladů. Před prodejem ověřte údaje podle výrobního štítku konkrétního kusu.